

髓内钉VI



产品编码	规格	颈干角	产品编码	规格	颈干角	产品编码	规格	颈干角
9109009180	φ9x180	125	9107010240	φ10x240	125	9108010220	φ10x220	130
9109009200	φ9x200	125	9107011180	φ11x180	125	9108010240	φ10x240	130
9109009220	φ9x220	125	9107011200	φ11x200	125	9108011180	φ11x180	130
9109009240	φ9x240	125	9107011220	φ11x220	125	9108011200	φ11x200	130
9110009180	φ9x180	130	9107011240	φ11x240	125	9108011220	φ11x220	130
9110009200	φ9x200	130	9107012180	φ12x180	125	9108011240	φ11x240	130
9110009220	φ9x220	130	9107012200	φ12x200	125	9108012180	φ12x180	130
9110009240	φ9x240	130	9107012220	φ12x220	125	9108012200	φ12x200	130
9107010180	φ10x180	125	9107012240	φ12x240	125	9108012220	φ12x220	130
9107010200	φ10x200	125	9108010180	φ10x180	130	9108012240	φ12x240	130
9107010220	φ10x220	125	9108010200	φ10x200	130			

抗旋加压钉I (组合拉力螺钉)



产品编码	规格	产品编码	规格	产品编码	规格
9111011070	70	9111011090	90	9111011110	110
9111011075	75	9111011095	95	9111011115	115
9111011080	80	9111011100	100		
9111011085	85	9111011105	105		

抗旋加压钉I (组合加压螺钉)



产品编码	规格	产品编码	规格	产品编码	规格
9112077065	65	9112077085	85	9112077105	105
9112077070	70	9112077090	90	9112077110	110
9112077075	75	9112077095	95		
9112077080	80	9112077100	100		

交锁螺钉I



产品编码	规格	产品编码	规格	产品编码	规格
9113011070	70	9113011090	90	9113011110	110
9113011075	75	9113011095	95	9113011115	115
9113011080	80	9113011100	100		
9113011085	85	9113011105	105		

UHC 空心螺钉



产品编码	规格	备注	产品编码	规格	备注
3146035013	尾帽 0	φ3.5x13	3146035023	尾帽 10	φ3.5x23
3146035018	尾帽 5	φ3.5x18	3146035028	尾帽 15	φ3.5x28

钛质接骨螺钉



产品编码	规格	产品编码	规格	产品编码	规格
3529050026	φ5.0x26	3529050038	φ5.0x38	3529050050	φ5.0x50
3529050028	φ5.0x28	3529050040	φ5.0x40	3529050052	φ5.0x52
3529050030	φ5.0x30	3529050042	φ5.0x42	3529050054	φ5.0x54
3529050032	φ5.0x32	3529050044	φ5.0x44	3529050056	φ5.0x56
3529050034	φ5.0x34	3529050046	φ5.0x46	3529050058	φ5.0x58
3529050036	φ5.0x36	3529050048	φ5.0x48	3529050060	φ5.0x60

Focusing On Orthopaedics


专注骨科事业

北京市富乐科技开发有限公司
Beijing Fule Science & Technology Development Co., Ltd

地址: 北京市平谷区马坊工业园区西区 50 号
Add: No.50, Mafang West Industry Zone, Pinggu District, Beijing
销售热线 Sale hot lines: 010-60999861/2 电话 Tel: 010-60999866/32/75/17
邮件 Email: YXSC@fulekeji.com 邮编 Post Code: 101204 传真 Fax: 010-60999863/8741

股骨联合加压髓内钉

Combined compression intramedullary nail of femur

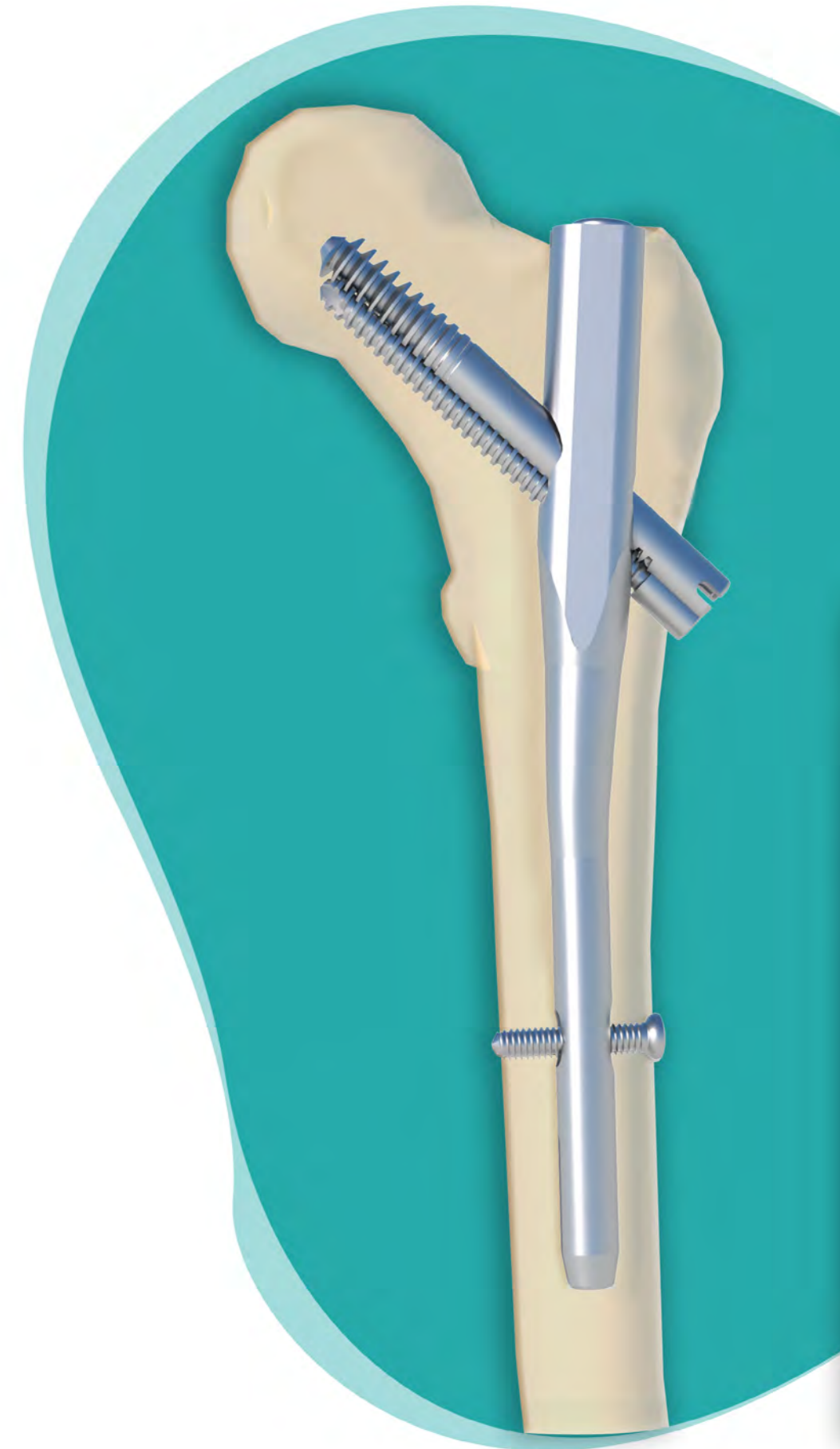

总体特点

- 联合交锁的双钉模式既避免了传统重建钉产生的“Z效应”，又提供可控制的滑动加压效果。
- **主钉设计**
 - 125°和130°两种颈干角设计，满足股骨颈多样解剖结构；
 - 近端梯形的横断面犹如关节假体柄设计，增强稳定性和力学优势；
 - 远端开槽设计，分散应力；
 - 远端可选择动力或静力锁定，满足临床需求。
 - 内部预置顶丝，实现手术时一步锁紧联合交锁钉，减少手术步骤。
- **联合加压钉设计**
 - 可控的线性加压让术者在手术过程中就可看到或触摸到骨折的良好复位，加压效果比单枚螺钉效果更理想；
 - 最佳的稳定性，抗旋转，防切出；


适应症

- 转子间骨折（31-A1 和 31-A2）；
- 经转子骨折（31-A3）；
- 高位转子下骨折（32-A1）；

禁忌症

- 低位转子下骨折；
- 股骨干骨折；
- 单纯或合并股骨颈中段骨折。

细节介绍

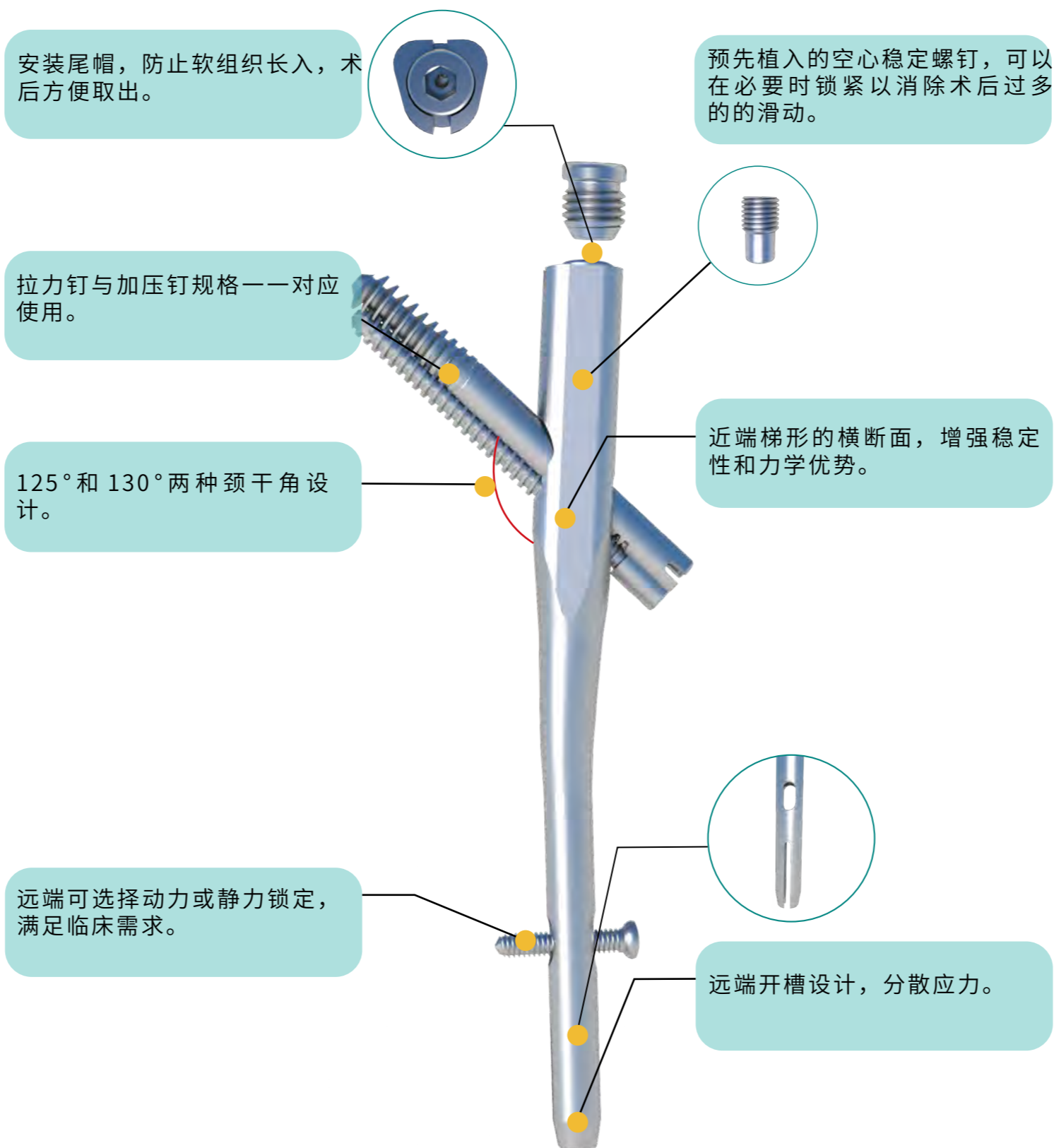

产品零件

